

**+
WE
KNOW
ENDO.**


130 YEARS



Catálogo ENDO Maillefer 2025

FRESA ENDO Z

MAILLEFER

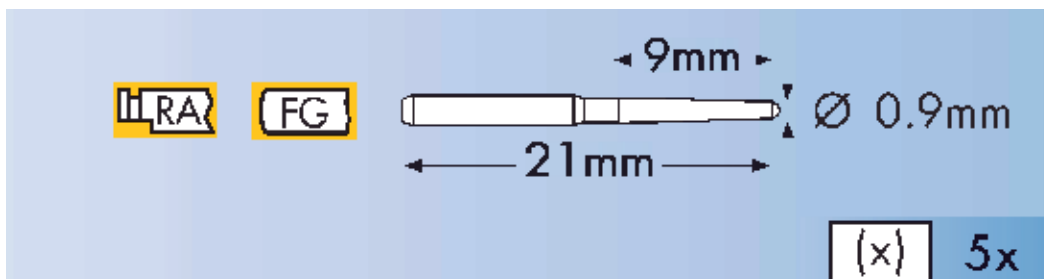


Instrumento en carburo de tungsteno, sirve para definir las paredes (paralelas) en la apertura, punta inactiva

FRESA DIAMENDO

MAILLEFER



Fresa diamantada con punta inactiva, troncocónica sirve para definir aperturas (paredes paralelas).

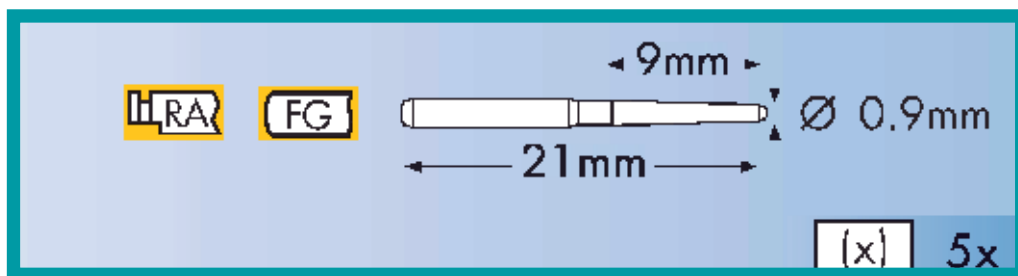


FRESAS GATES

MAILLEFER



Instrumento en acero inoxidable de baja velocidad para ensanchar el tercio coronal radicular y para definir las entradas de los conductos.

Punta Inactiva

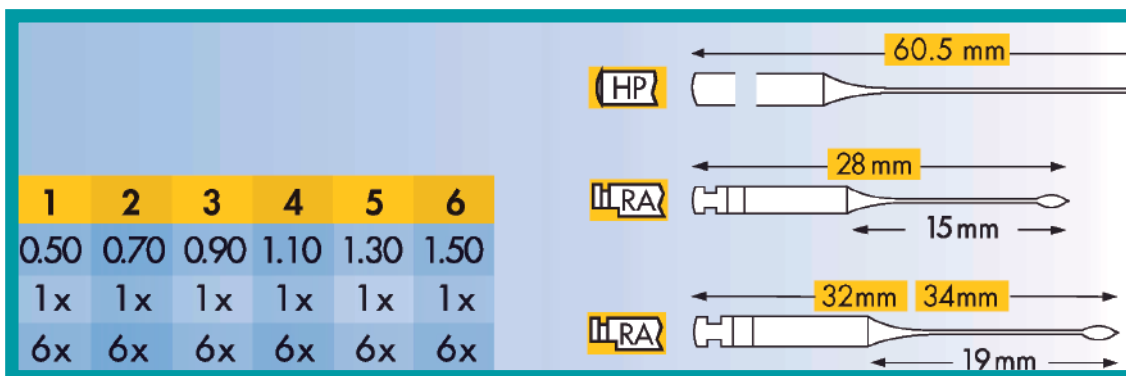

FRESAS PEESO

MAILLEFER




Instrumento en acero inoxidable con punta inactiva de baja velocidad

Usos: Para ensanchar el tercio coronal radicular

Desobturar conductos con guta-percha

							60.5 mm	
							HP	
1	2	3	4	5	6			28 mm
0.70	0.90	1.10	1.30	1.50	1.70		IRA	15 mm
1x	1x	1x	1x	1x	1x			
6x	6x	6x	6x	6x	6x		IRA	32 mm
								19 mm

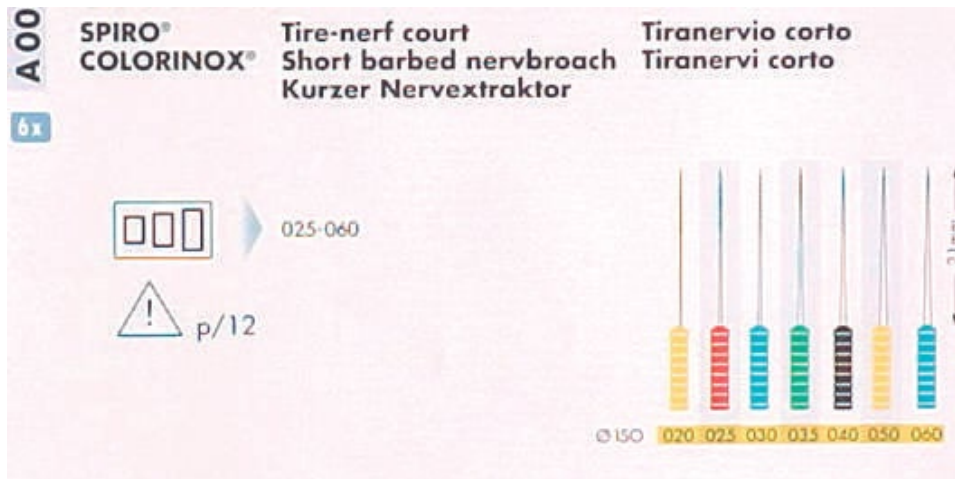

Instrumento en acero inoxidable que sirve para retirar el tejido pulpar de los conductos.

GUTTACORE


Obturadores de gutapercha, vástago gutapercha con enlaces cruzados recubierto por gutapercha termoplástica.

Relleno 3D

Las fuerzas hidraulicas sobre la gutapercha permite que fluya en 3 dimensiones para alcanzar conductos accesorios.

Ideal para conductos largos, estrechos, curvos.

Fácil remoción de excesos

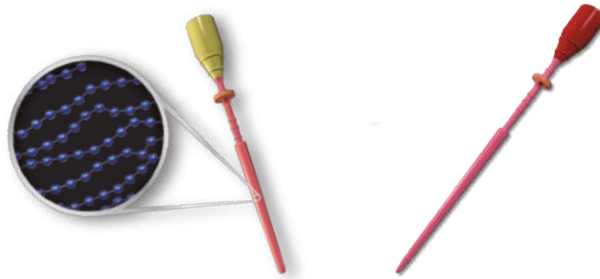

GLYDE

MAILLEFER



Este material es un quelante es decir un coadyuvante en la preparación biomecánica ya que lubrica el instrumento, descalcifica el tejido y produce reacción burbujeante para la limpieza del conducto, es peróxido de carbamida con EDTA



LIMAS K-FLEXO READY STEEL

MAILLEFER



Limas manuales pre esterilizadas, presentación blíster de 6 unidades.

Hecha en acero inoxidable, con alta flexibilidad, con punta piloto no activa, tiene más estrías por unidad de área, entorchada a partir de un vástago cuadrado (sección transversal cuadrada), corta al entrar y al salir.

Disponibles: primera serie y segunda serie

Longitudes: 21mm, 25 mm y 31 mm

LIMAS HEDSTROEM READY STEEL

MAILLEFER




Limas manuales preesterilizadas, presentación blíster de 6 unidades, hechas en acero inoxidable, tiene corte en la punta, corta solo saliendo, es torneada a partir de un vástago cilíndrico (sección transversal cilíndrica), su capacidad de corte es mayor y se usa solamente en conductos rectos.

Disponibles: primera serie y segunda serie
Longitudes: 21mm, 25 mm y 31 mm

C + FILES READY STEEL

MAILLEFER

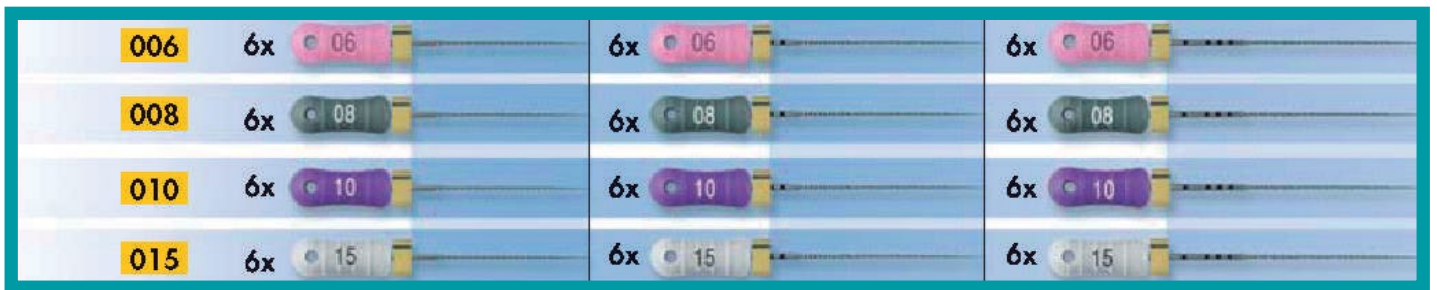

Limas manuales preesterilizadas, presentación blíster de 6 unidades, hechas en acero de carburo, diseñadas específicamente para trabajar en conductos calcificados.

Tamaños disponibles: 6, 8 10 y 15

Longitudes disponibles: 21mm, 25mm y 31mm

LIMAS NITIFLEX

MAILLEFER



										
Ø ISO	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
015-040	1x	1x	1x	1x	1x	1x				
	6x	6x	6x	6x	6x	6x	6x	6x	6x	6x

Limas manuales hechas en níquel titanio, fabricadas en torno, más flexibles con menos capacidad de corte, punta piloto, diseñada para conductos curvos, corta al entrar y al salir.

LIMAS MACCESS K

MAILLEFER



Limas manuales, hecha en acero inoxidable con más masa metálica, mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo.

21 mm, 25 mm,
31 mm / 006-140
Código de colores ISO
Caja de 6



LIMAS MACCESS K FLEXO

MAILLEFER



Limas manuales, hecha en acero inoxidable entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo, la parte activa tiene mas estrías por unidad de área.

21 mm, 25 mm,
31 mm / 006-140
Código de colores ISO
Caja de 6



LIMAS MACCESS HESTROEM

MAILLEFER



Limas manuales, hechas en acero inoxidable mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cilíndrico, corta saliendo.

21 mm, 25 mm,
31 mm / 006-140
Código de colores ISO
Caja de 6



PROTAPER®
UNIVERSAL

For Hand Use



- Usa el mismo diseño de las limas rotatorias
- Dispone de mangos Siliconados
- Mejora Confort
- Mejor Sensación Táctil
- Menos Fatiga manual

Motor para preparación endodóntica.

- Botón en la pieza de mano del motor de encendido / apagado.
- cabeza de contra-ángulo miniatura
- Pantalla grande a color
- Ligero.



CON UN PLUS

- Movimiento recíprocante
- Biblioteca de memorias.
- Navegación de la biblioteca de memorias fácil.
- Función de autoreversa, autoreversing y auto stop
- Es posible la calibración del torque y la velocidad

MAILLEFER

LOCALIZADOR APICAL PROPEX pixi



- Control progresivo acústico para un doble control (visual y acústico)
- Baterías recargables
- La última tecnología multifrecuencia
- Totalmente automático

ProTaper Retratamiento


Limas rotatorias de Niti de conicidad variable
Limas manuales de conicidad variable de Niti

Protaper Retratamiento incluye tres instrumentos

D1 : desobtura tercio Coronal

D2 : desobtura tercio medio

D3 : desobtura tercio apical

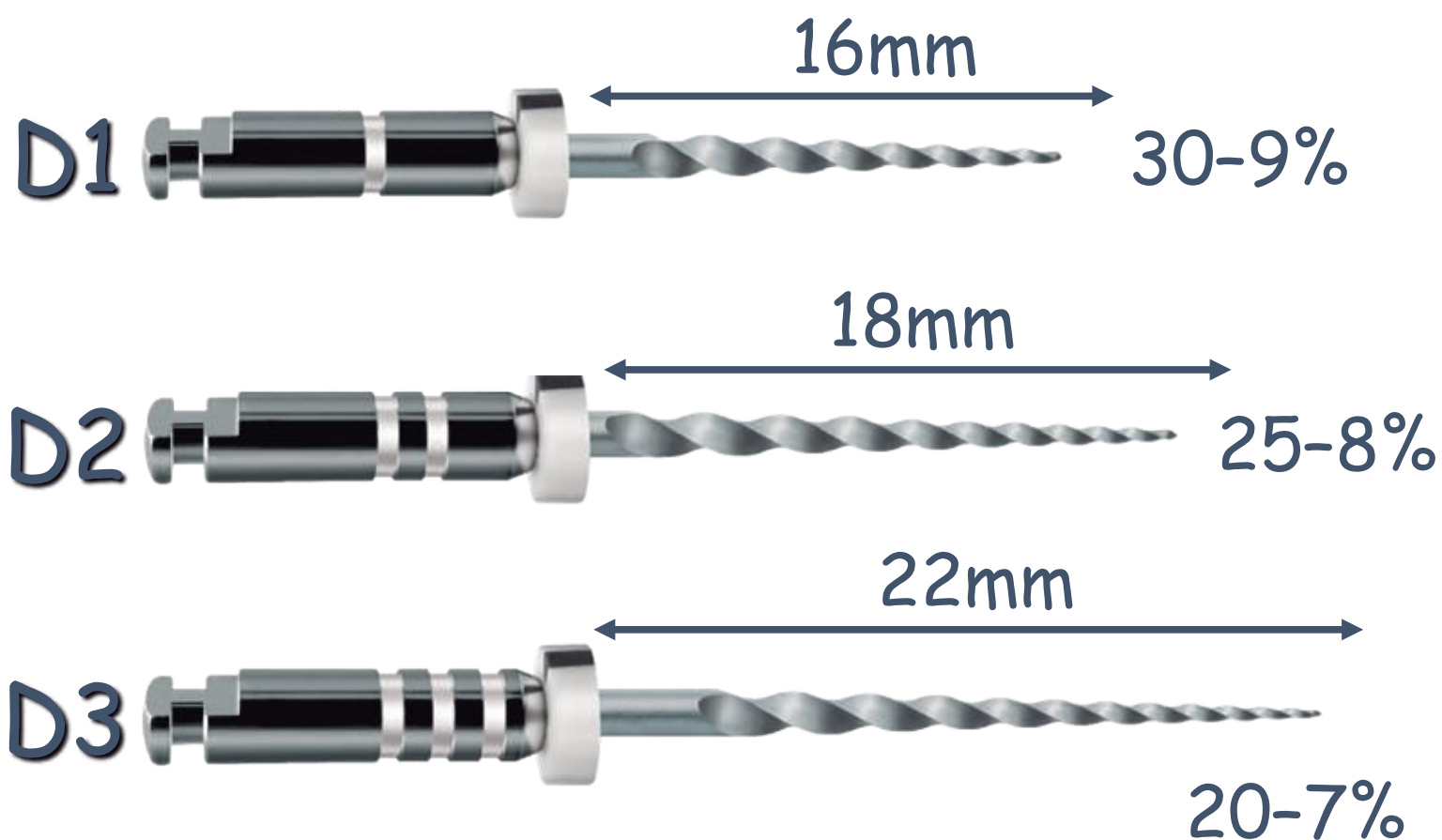

Lima rotatoria para realizar preensachamiento endodóntico

Punta: semiactiva 0.16, conicidad variable del 2 al 8-
Sección transversal: cuadrada

Velocidad: 300 rpm
Torque: 2.0

Presentación comercial blíster de 3 y 6 limas;
21mm, 25 mm y 31mm

Blister preesterilizados

NiTi[®] M- CABLE mejora la flexibilidad de la lima, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia de corte. Esto se logra a través de un proceso de tratamiento térmico M - Wire[®] NiTi también proporciona una mayor resistencia a la fatiga cíclica.



Wave one gold Glider

MAILLEFER

Lima preciprocante para preensanchamiento endodóntico.

Parte activa de 16 mm

Sección transversal con la forma de un paralelogramo rectangular.

Punta inactiva tiene un diámetro 0.15 y una conicidad de 2%, la que se incrementa hasta llegar a un 6% en D16.

Mango de 11mm.

Niti tratamiento térmico gold

Longitudes: 21mm, 25mm y 31 mm

Presentación: Blíster pre esterilizados

WaveOne® Gold Glider



PROTAPER[®] NEXT[™]

- Sistema de limas para instrumentación de conductos radiculares de Niti (tratamiento térmico M WIRE)
- Instrumento de Rotación continua (rotatorio)

Velocidad: 300 rpm y torque: 2.5 Ncm

- Movimiento asimétrico (mayor resistencia a la fractura), espacio amplio para la remoción de desechos.
- Sección transversal rectangular (la lima sólo contacta con la pared en 2 puntos).
- Conicidad variable decreciente.
- Presentación comercial Blíster preesterilizados 3 limas; longitudes de 21 mm, 25 mm y 31 mm.
- Disponible: Puntas de papel y de gutapercha para el sistema

		Active part lengths						Tip Ø
		16mm	13mm	9mm	6mm	3mm	1mm	
X1						3% Ø 0.31	4% Ø 0.21	0.17
						6% Ø 0.43	6% Ø 0.31	0.25
X2						7.5% Ø 0.53	7.5% Ø 0.38	0.30
						6.5% Ø 0.60	6.5% Ø 0.47	0.40
X3						6% Ø 0.68	6% Ø 0.56	0.50
X4								
X5								

Sistema de limas reciprocantes instrumentación de conductos radiculares Niti (tratamiento térmico GOLD).

Selección de un único instrumento para la preparación de conductos radiculares.

Presentación comercial: blíster pre esterilizados de 3 o 6 instrumentos, blíster surtidos de 4 instrumentos.

Sección transversal paralelogramo, puntos alternos de corte (disminuye riesgo de fractura).

Longitudes disponible: 21, 25, 31mm.

SMALL

D 16

D 1-3



20.07-04

PRIMARY



20.07-03

MEDIUM



35.06-04

LARGE



45.05-04

*Taper fijo del D1 al D3 y decreciente del D4 al D16 para preservar la dentina coronaria
Puntas de papel y de gutapercha para el sistema

Protaper Gold

MAILLEFER

La misma técnica ganadora
que PROTAPER® UNIVERSAL
con **mayor flexibilidad**




Sistema rotatorio para instrumentación endodóntica
Niti (tratamiento térmico Gold)
Conicidad variable

Sección transversal triangular cóncava: Flexibilidad (F3,F4yF5)

Sección transversal triangular convexa: Resistencia (S1,S2,SX,F1yF2)

Presentación: blíster preesterilizados

Longitudes disponibles: 21, 25, 31mm
Mango 11 mm

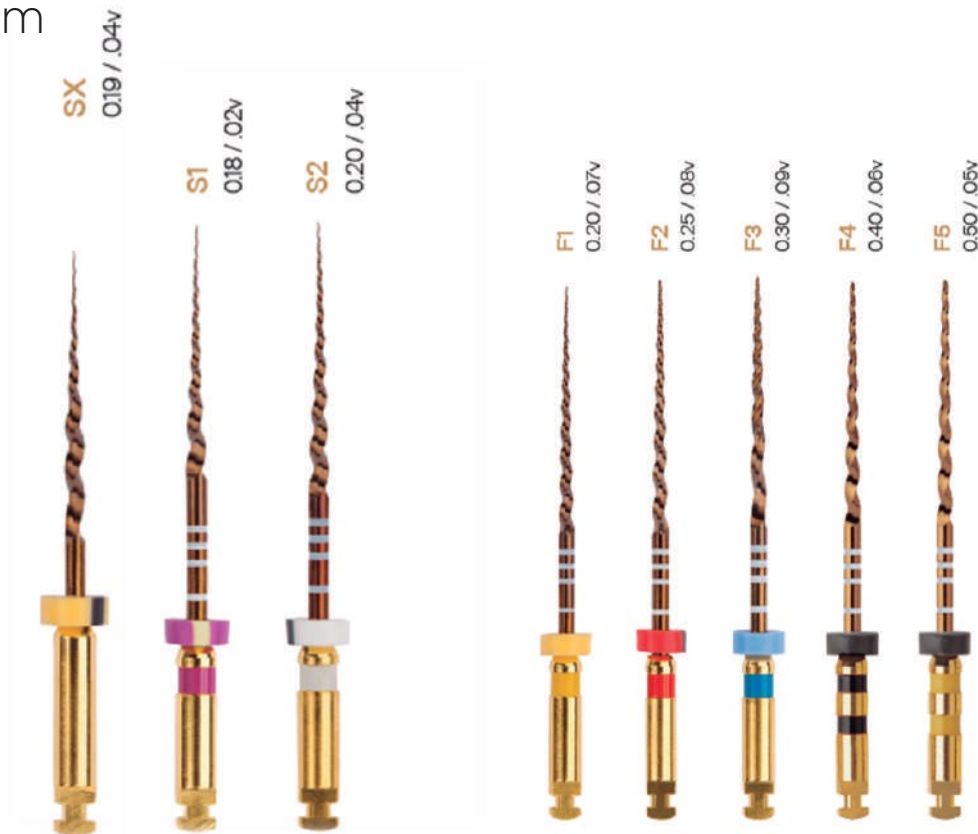

Puntas de papel y de gutapercha para el sistema

Cemento para obturación endodóntica




A base de Resina

El tiempo mínimo de trabajo 4 horas a 23 grados.

Tiempo de fraguado mínimo de 8 horas a 37 grados.

HEAT CARRIER PLUGGER

MAILLEFER

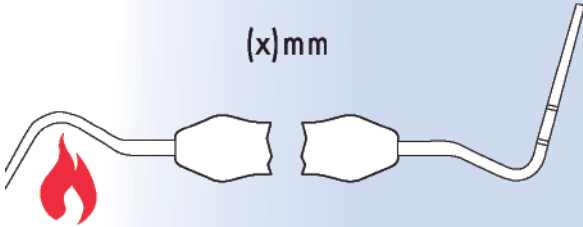

The diagram illustrates the Heat Carrier Plugger instrument, which consists of a handle and a working end. The handle is marked with a flame icon and a red dot. The working end is marked with a red dot and a red dot. The dimensions are given in millimeters (mm).

No	1/1	1/2	2/3	2/4
(x)mm	0.5mm	0.6mm	0.8mm	1.0mm
(x)	4 x	4 x	4 x	4 x
□□□	1 x	1 x	1 x	1 x



Este instrumento por un lado se calienta y corta y por el otro sirve para la condensación vertical

Cemento reparador de conductos radiculares
Componente principal: oxido de calcio 65%



Usos:

- Perforaciones (en cualquier región)
- Apexificaciones
- Cirugía endo periodontal
- Recubrimiento pulpar directo
- Pulpotomía
- Reparación de reabsorciones internas
- Permite la formación de nuevo cemento sobre la interface de la raíz restaurada
- Bajo grado de infiltración marginal
- Presenta suficiente tiempo de trabajo

CLEAN STAND

MAILLEFER



Esponjas





Endo stand

Flexobend



CALIBRADOR DE CONOS

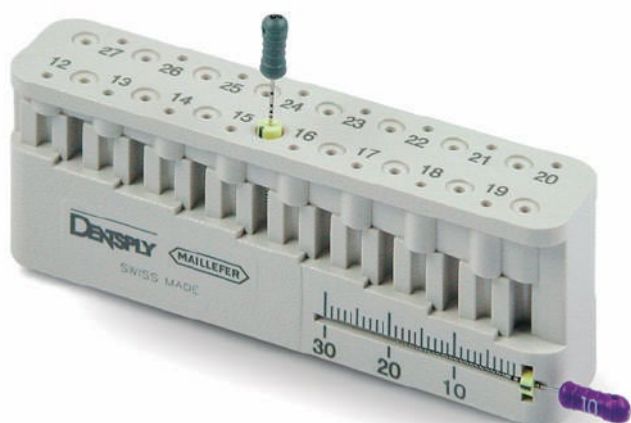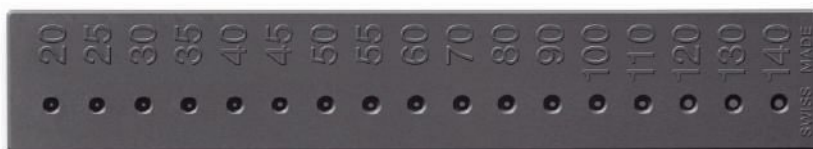

MINI ENDOBLOCK



TWIN BLOCK

